

Turning Master
NEO

ターニングマスターネオセット (CR-380)

保証書

本書は、取扱説明書による正常なご使用で、保証期間中に故障した場合に本書記載内容にて無料修理させていただくことをお約束するものです。保証期間中に故障が発生したときは本書と商品をご持参の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。
※欄に記入のない場合は、有効とはなりませんので必ずご記入の有無をご確認ください。
本書は再発行いたしませんので、紛失なさらないよう大切に保管してください。

- 1.本書はターニングマスターネオ専用ポンプ及びターニングマスターネオ専用マットの保証書とさせていただきます。
- 2.保証期間中であっても次の場合には有料修理になります。
ア) ご使用の誤りや改造による故障及び損傷。
イ) お買い上げ後の落下、輸送等による故障及び損傷。
ウ) 火災、天災、塩害等による故障及び損傷。
エ) 本書の提示がない場合。
オ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合。
- 3.ご贈答品等で本保証書に記入してある販売店に修理が依頼できない場合は、株式会社ケープにご相談ください。

無料修理保証期間 (お買い上げ日)	平成	年	月	日より3年間
※お客様				
お名前	TEL			
ご住所				
※取扱店		※製造番号		
店名／住所／TEL				

●製造元

株式会社 **ケープ**

本社／〒238-0013 神奈川県横須賀市平成町2-7 TEL：0468-21-5511 FAX：0468-21-5522
福岡営業所／〒810-0014 福岡市中央区平尾2-17-20 TEL：092-521-0421 FAX：092-521-0399
ホームページ／<http://www.cape.co.jp/>

Turning Master


NEO

体位変換マット ターニングマスターネオ

取扱説明書

(保証書付)

この度はターニングマスターネオをお買いあげいただき誠にありがとうございます。

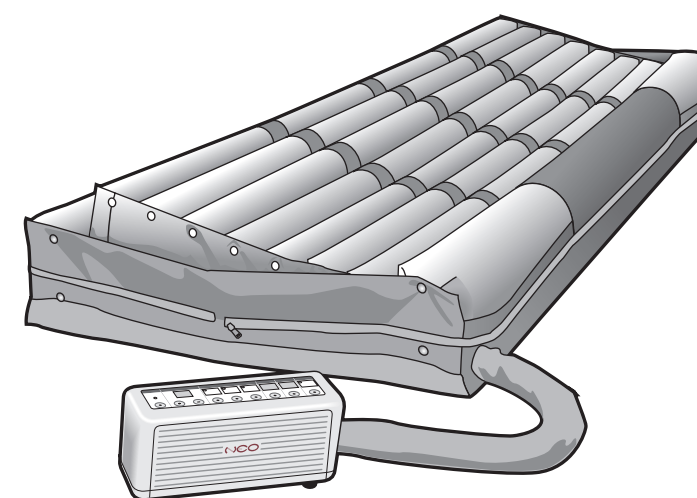

- P.2 ターニングマスターネオについて
- P.4 安全にお使いいただくために
- P.6 設置準備の前に
- P.9 設置準備をしましょう
- P.14 実際に使用しましょう
- P.20 お手入れの仕方と保管・廃棄方法
- P.22 故障かな?と思ったら…
- P.24 保証書

- ターニングマスターネオをご使用になる前に、この取扱説明書を始めから最後まで、必ずお読みください。
- いつでも読み返すことのできるように、この取扱説明書をターニングマスターネオのそばに保管してください。
- 本書の最終ページは保証書になっています。

P.2 ターニングマスターネオについて

ターニングマスターネオのご使用に際して

ネオは体位変換をアシストすることを目的としたマットです。
身体をやさしく包み込むように傾けるので、安全に、快適に体位を変えられます。

ターニングマスターネオはこのような場合でのご利用をおすすめします

- 人の手による体位変換時に痛みを伴う方
(リウマチ等)
- 日中独居、老々介護などにおいて、在宅
介護で介護力が不足している方
- 就寝時の体位変換
(介護者、被介護者への配慮)

ご使用に際しては医師や看護婦、ケア
マネジャーなどの専門家と相談してください。
また、使用されているうちに、ご使用者の全身
状態が変化した場合にも、専門家に相談し
用具が適正かどうか確認してください。



ネオは「拘縮」「るいそう」「骨突出」の顕著な方へのご使用は控えてください。
長期療養による身体的な変化(拘縮・るいそう・骨突出の出現)は、褥瘡等のハイリスク
患者であり画一的な体位変換は圧力集中等の危険を増大させる場合があります。
より専門的な対応が要求されますので、お医者様など臨床家へのご相談が必要です。


特 徴

1 安全に、快適に体位変換

ネオは身体を預けるものだから「安全性」と「快適性」をカタチにしました。やさしく身体を保持しながら体位変換動作を行ないますので本人に不快感を与えません。体位変換のために必要だった力はネオに任せることにより介護する方は大切なご本人への声掛け、触れ合いなどに専念できます。

●ズレカから護る縦長式エアセル


マットを左右に傾斜する体位変換マットの問題点であった身体の滑り落ち。ネオはエアセルを縦方向に配置することによりこれを解消。身体を包み込みながらターニングします。

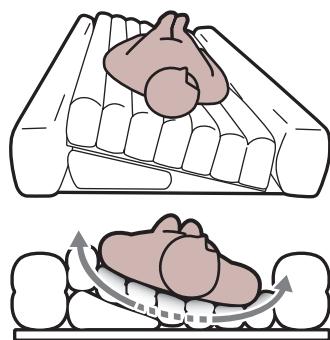


●低圧保持を実現する2層式エアセル

安定感良く、しかも低圧で身体を支えるためエアセルは2層式にしました。
上層では柔らかく身体を包み込み、下層ではしっかりと支え底づきを防ぎます。
※ネオは静止型です。エアセル膨張収縮させる従来型ではありません。

〈通常時〉

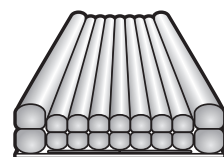


〈寝返動作時〉

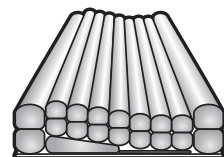

P.3 ターニングマスターネオについて


2 ベッドを背上げしても安心して使える 「背上げモード」

ベッドを背上げした使用環境での底づきの危険性についてもネオは配慮しました。
ボタンひとつでマット内圧がアップし、しっかりホールド。底づきを回避し、臀部への圧力の集中がもたらす褥瘡発生を回避します。

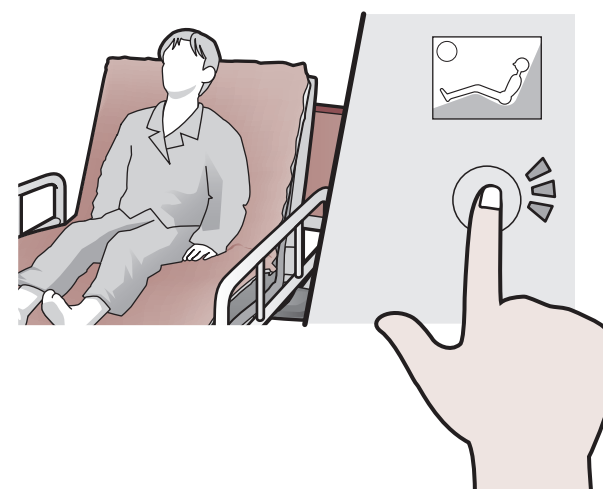

3 操作は分かりやすいタッチパネル式

どなたにでも安心してご利用いただけるよう操作は大きな表示でシンプルなタッチパネル式。
ボタンひとつでお好みの設定にできます。

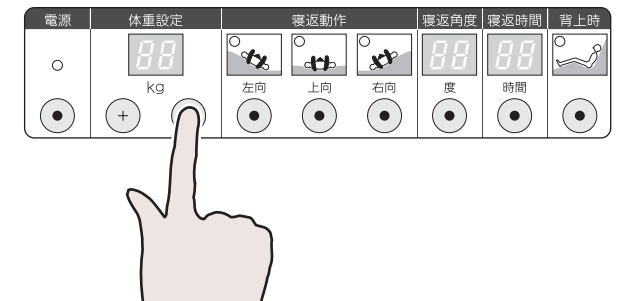

【体位変換は褥瘡^{じよくそう}予防以外にもこれだけ効果があります】

豆知識

■内臓機能を正常に保つ

背骨を動かすと腹筋等筋肉が動き、連られて腸管が動くなど、内臓を刺激して機能を促し、身体に大きな影響を与えます。また、手足などを動かすだけで神経反射が起こります。
例：褥瘡処置時に排尿・排便が多くあることなどetc

■循環障害を予防する

血液の流れが変わるため血行が良くなり、血液の循環障害などによる臓器のむくみや機能低下を予防する。

■肺炎を予防する

肺部における分泌物の沈下やうつ血を防ぎ、沈下性肺炎を予防する。

■関節の拘縮や変形を予防する

動かさなければ筋肉がやせておとろえ、関節が動かなくなるが、少し動かすだけでも予防効果がある。

■心理面でも効果的

心理面でも重要な作用を及ぼします。身体の向きを変えると視界の変化や痛み、シビレを取り去り精神的な苦痛から解放する。

P.4 安全にお使いいただくために

ターニングマスターネオの取り扱いにあたっては本書をよく読んでご理解いただき、必ず本書の指示に従ってください。

重要安全情報

ターニングマスターネオのご使用中に生じる可能性のある災害を回避するためには、その原因となり得る危険の要素がどこにあるかを、予め知っておくことが不可欠です。しかし当社において、潜在的なあらゆる危険性を予想することは困難です。従って、本書には知り得る限りの安全に関する警告情報を、下記のように定義して記載してあります。



このマークにある指示に従わなかった場合に、物的損害や負傷、死亡につながる恐れのある危険性を警告しています。特に重要なため、下記「安全上のご注意」にまとめて記載し、警告します。



このマークにある指示に従わなかった場合に、本商品が正常に機能しなくなる可能性を警告しています。

安全上のご注意（警告）



ネオをご使用の際は、必ずサイドレールを取りつけて下さい。



サイドレール




ネオのご使用に際しては、必ず医師や看護婦などの専門家と相談の上ご使用ください。また使用中に身体に異常を感じたり、不安を感じた場合は直ちに使用を止め、専門家に相談してください。症状悪化や事故の恐れがあります。



ネオは空気の層でご使用者の体を柔らかくフLOAT（浮かせて）して保持するのが特徴です。従って、心臓マッサージ等、反発力の強い床などの上でないと効果のでない処置が予め予測されるような患者へのご使用はおひかえください。ICU等、万が一の緊急処置で心臓マッサージの予想される病棟でのご使用に際しては固い板をご用意いただくなど医師の指導の下でご使用ください。




送風チューブは必ず足側になるようにネオを設置してください。送風チューブが頭側にくると、送風チューブが首にからんで事故を招く恐れがあります。

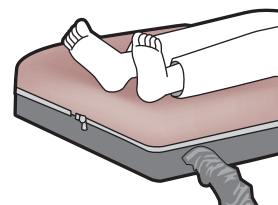

P.5 安全にお使いいただくために




ネオ専用ポンプを浴室などの湿気の多い場所で使用したり、ネオ専用ポンプに水などの液体をかけたり、こぼしたりしないでください。感電事故や故障の原因となります。

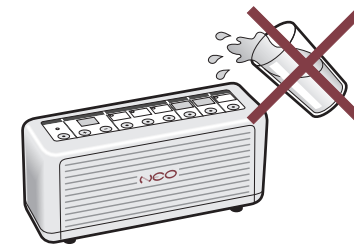

ご自分で修理するためにネオ専用ポンプのネジを取り外し、ケースを開けることは絶対にしないでください。感電事故や故障の原因となります。



ネオ専用ポンプの電源プラグは、必ず日本国内の家庭用コンセント（100V／50／60Hz）に確実に差し込んでお使いください。これ以外の電圧で使用すると、火災事故や故障の原因となります。

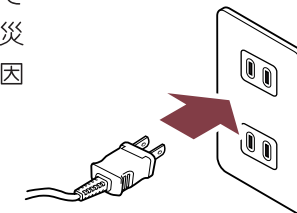


ネオの専用マットと専用ポンプ以外の組み合わせでは、絶対に使用しないでください。期待した効果が得られないばかりか、火災事故や故障の原因にもなります。



ネオ専用ポンプを当社に承諾無しに改造したりすることは、安全上で重大な影響を及ぼす恐れがあります。決してお客様による改造は行わないでください。




濡れた手でネオ専用ポンプの電源プラグを抜き差ししないでください。感電事故や故障の原因となります。

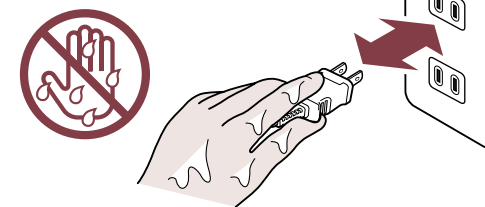

ネオを長期間使用しないとき、またネオ専用ポンプのお手入れの際には、電源プラグをコンセントから外してください。火災事故や感電事故、故障の原因となります。



ネオ専用ポンプの電源コードを無理に引っ張ったり、傷つけたり、破損させたり、ドアに挟んだりしないでください。またコンセントからプラグを抜く時には、必ず電源プラグを持って抜いてください。感電事故や火災事故、故障の原因となります。

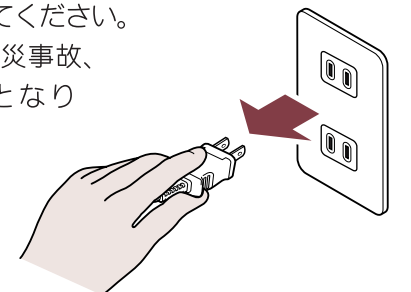

P.6 設置準備の前に

この取扱説明書の見方

- 必ず、初めから最後まで通してお読みください。
- 各説明には以下の3つのマークがあり、それぞれ詳しい情報が記載されています。必要に応じて参照してください。

説明

準備や操作の指示内容について、その必要性を説明しています。

確認

準備や操作の指示内容について、それが指示通りにできたかを確認する方法を説明しています。

工夫

ちょっとした工夫で、準備や操作がより効率的になるアイデアを説明しています。

●使用を開始してからも、困ったこと、わからないこと、不安なこと等が生じた場合にはこの取扱説明書の「故障かな?と思ったら…」(P.22～23)を見て、解決のための情報を得てください。故障でない場合、その問題についての説明が、この取扱説明書のどのページに記載されているかがわかるようになっています。


●上記の方法で解決が得られない場合は、この取扱説明書裏面の保証書をごらんになり、お買い上げになったご購入先、もしくは(株)ケープまでお問い合わせください。

梱包内容の確認

お手元にお届けした梱包には以下のものが入っています。ご確認ください。

●ターニングマスターネオセット〈CR-380〉


- ①ターニングマスターネオ専用ポンプ〈CR-381〉……×1
- ②ターニングマスターネオ専用マット〈CR-382〉……×1
- ③ターニングマスターネオ専用カバー〈CH-382〉……×1
- ④さらっとシーツ〈CK-361〉……×1
- ⑤取扱説明書(保証書付/本書)……×1

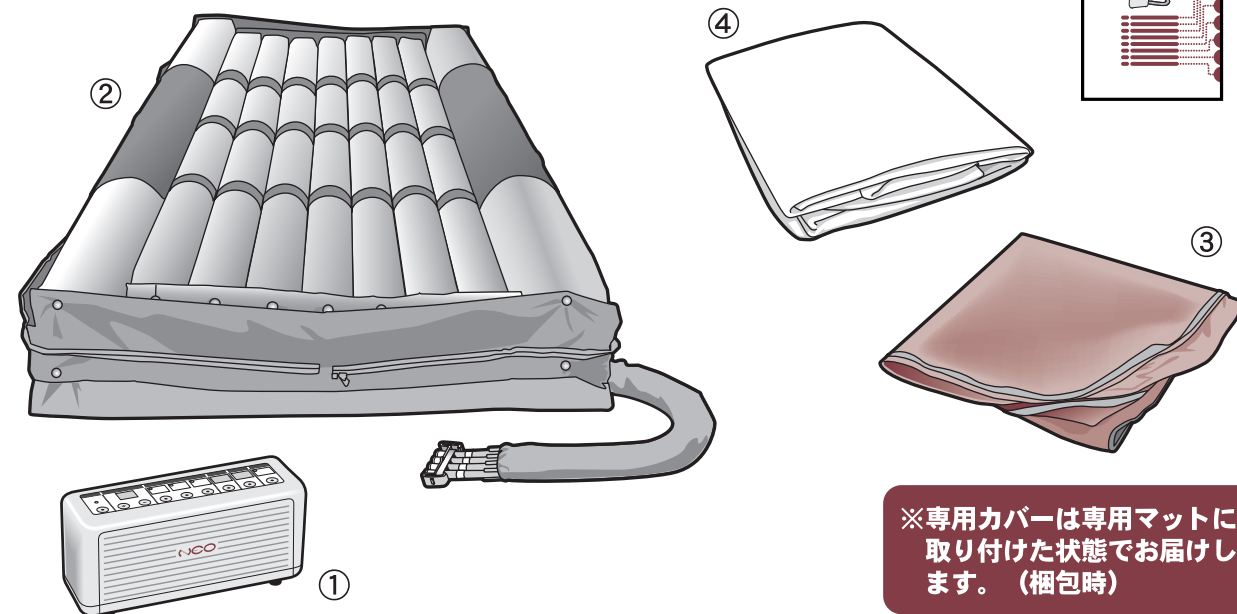


P.7 設置準備の前に

各部の名称

ターニングマスターネオ専用ポンプ〈CR-381〉

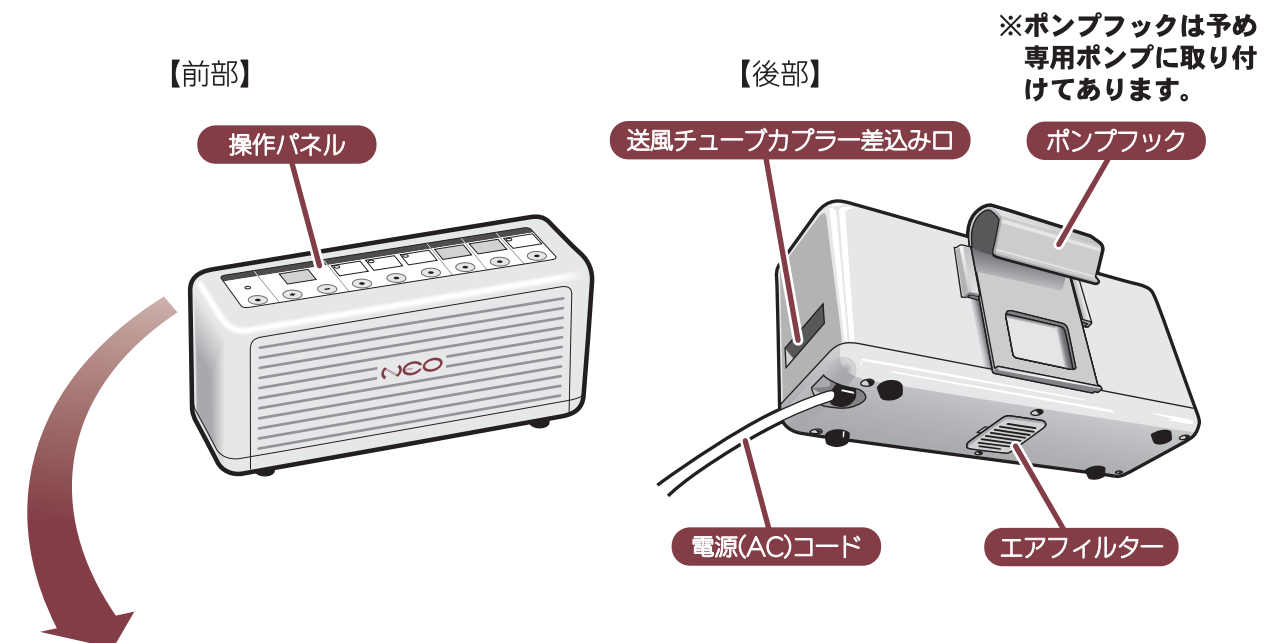


操作パネル拡大図

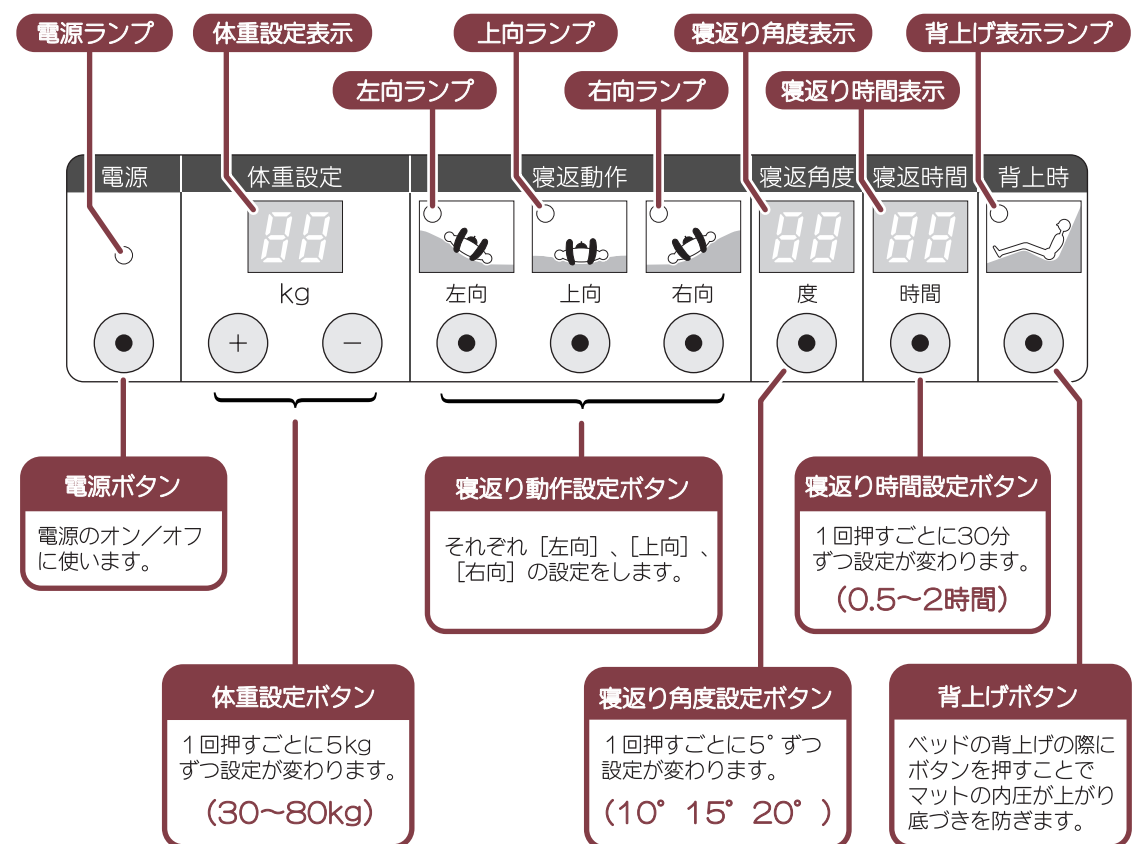

P.8 設置準備の前に

ターニングマスターネオ専用マット 〈CR-382〉

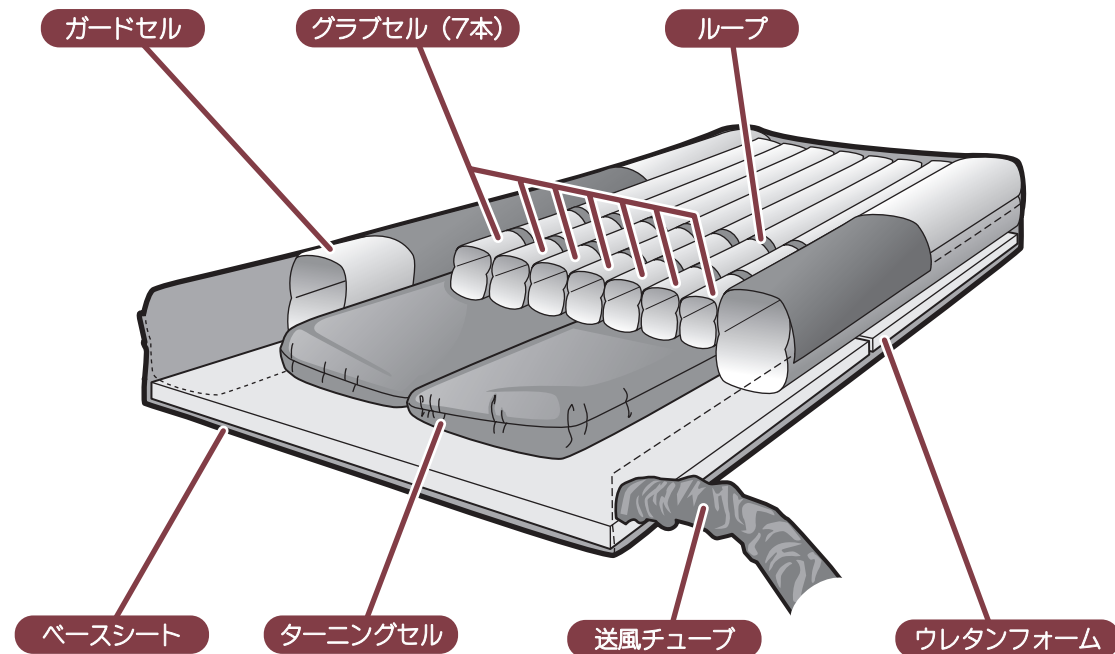


※送風チューブは予めネオ専用マットに取り付けてあります。

※ご使用前に送風チューブが、7本のグラブセル・両端のガードセル・底部左右のターニングセルそれぞれに、きちんと接続されていることを確認します。
(P 10参照)

※ベッドマットレス等の上で使用する際は、ウレタンフォームを抜いてから設置してください。
(P 9参照)

ターニングマスターネオ専用カバー 〈CH-382〉

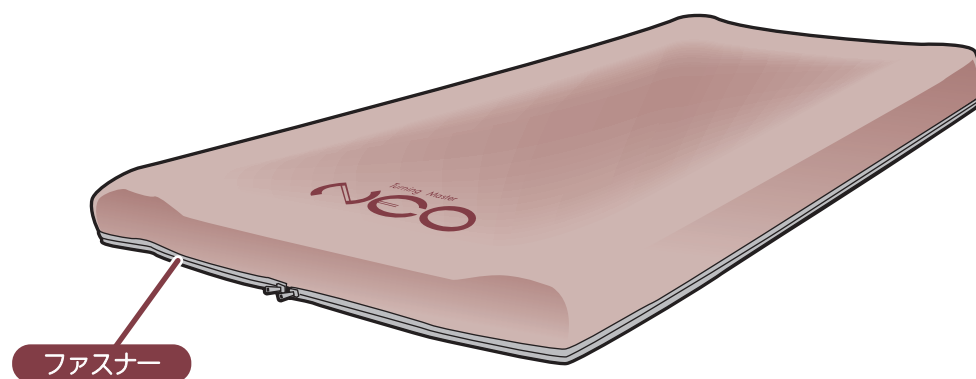


P.9 設置準備をしましょう


梱包を解いた後、ネオ専用マットをベッド上に設置します。ネオ専用マットとネオ専用ポンプを送風チューブで接続し、エアセル等のチューブの接続を確認します。以下にその手順をご説明します。

1 ネオ専用マットをベッド上（あるいは畳の上）に設置します。

- ベッドマットレスや布団の上に設置する際は、ネオ専用マット裏面のファスナーを開き、最下層にあるウレタンフォームを抜いてから設置してください。
(2枚に分かれて入っています)

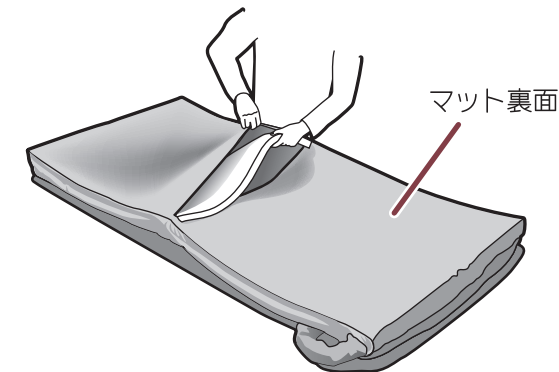

- エアセルが並んでいる面を上、送風チューブが出ている方が、必ず足側になるように設置してください。

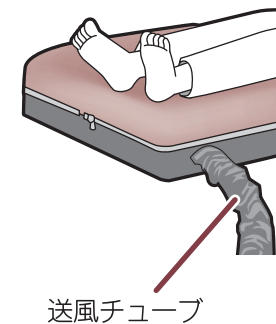

送風チューブは必ず足側になるように設置してください！

送風チューブが頭側にくると、送風チューブが首にからんで事故を招く恐れがあります。




送風チューブを、専用マットやベッドマットレスの下に巻き込まないでください！

送風チューブが折れ曲がったり圧迫されると、期待した効果が得られない恐れがあります。

P.10 設置準備をしましょう

2 ネオ専用マットから専用カバーを外し、エアセルとチューブの接続を確認します。

- ネオ専用マットからネオ専用カバーを外します。


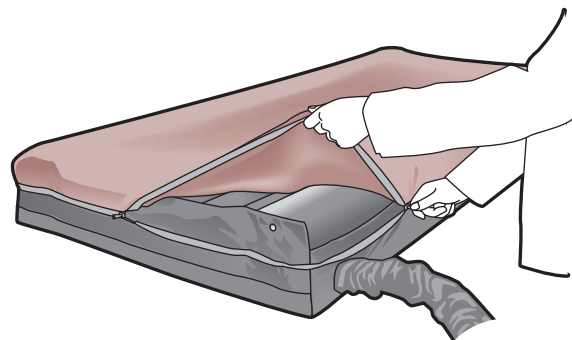


ご使用前に送風チューブの抜けや緩みがないか、しっかりと確認してください！

送風チューブに抜けや緩みがあると、エアセル等に空気が送られず、事故を招く恐れがあります。

- 7本のグラブセル、両端のガードセル、底部左右のターニングセルそれぞれが送風チューブと接続されていることを確認します。

グラブセル

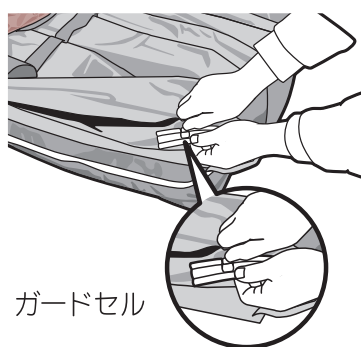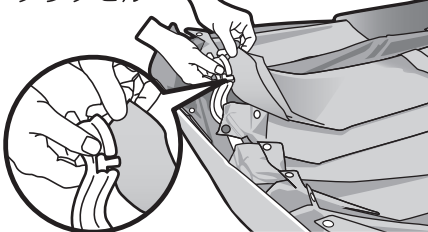


ガードセル



ターニングセル


- チューブの接続を確認したら、ネオ専用カバーをネオ専用マットに元通りに取り付けます。

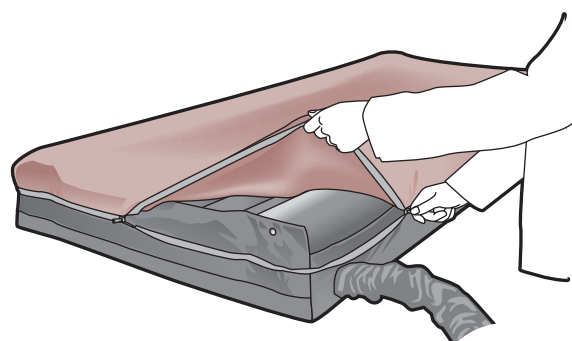

P.11 設置準備をしましょう

3 ネオ専用マットにさらっとシーツを被せます。

- ボックス形状となっていますので被せるだけでセットできます。

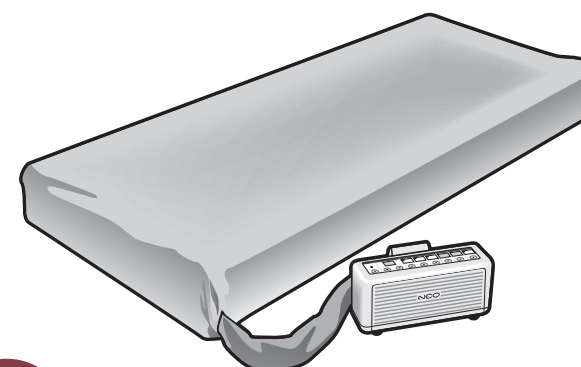


さらっとシーツはムレや静電気を防止します。

必ずご使用ください。

4 専用ポンプに送風チューブを接続します。

- ネオ専用マットに付いている送風チューブカプラーを、ネオ専用ポンプの送風チューブ差し込み口に、しっかりと差し込みます。

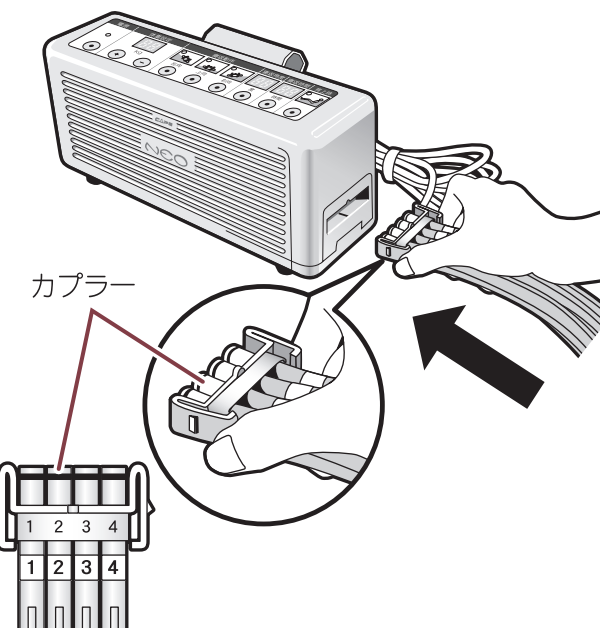

- カプラーからチューブがはずれた場合は数字を合わせて差し込み直してください。



必ずカプラーの突起がある方を上にして差し込んでください！

本来の機能をせず、事故を招く恐れがあります。



送風チューブが外れないように、カプラーを確実に接続してください！

エアセルに空気が送られないと、ネオ専用マットは機能しません。





専用ポンプから専用マットを取り外す場合送風チューブ先端のカプラーを掴んで引き抜いてください。

※送風チューブを持って引き抜くことはおやめください。


P.12 設置準備をしましょう

5 ネオ専用ポンプを正しく設置します。

●ベッドでご使用の場合はポンプフックを使い、ネオ専用ポンプをベッドのフットボードに引っ掛けて固定してください。ポンプフックを図のように斜めに傾けてから引っ掛けると楽にできます。

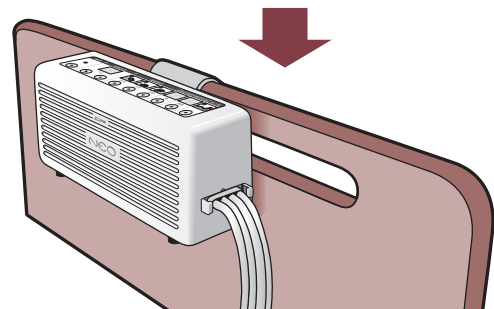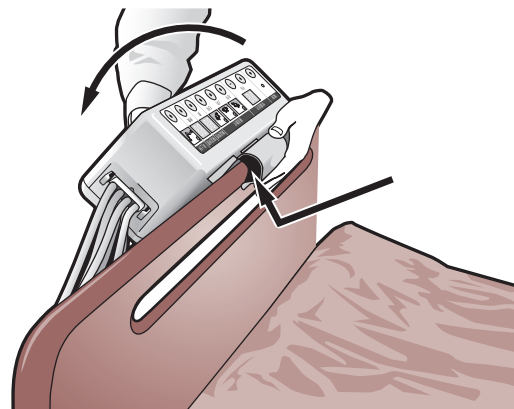

●畳の上や引っ掛ける場所のないベッドでご使用の場合は、ネオ専用ポンプを足側などの邪魔にならない水平な安定した場所に置いてください。

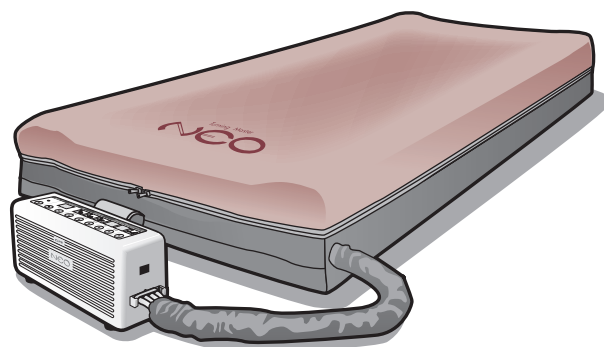

ネオ専用ポンプを浴室などの湿気の多い場所で使用したり、水などの液体をかけたり、こぼしたりしないでください！

感電事故や故障の原因となります。



送風チューブを折り曲げないでください！

十分な空気が送られないと、期待した効果が得られない恐れがあります。



高さ調節のできるベッドの下に設置した場合、ベッドのフレームと床の間にはさまれないよう注意してください！

ベッドの高さを下げる際、フレームと床の間にはさまり、ポンプが破損する恐れがあります。



ネオ専用ポンプをベッドの脚部などに直接ふれさせないでください！

振動音を発する恐れがあります。また、枕元への設置も避けてください。わずかな作動音ですが安眠を妨げる可能性があります。

P.13 設置準備をしましょう


6 ネオ専用ポンプをコンセントにつなぎ、ポンプを作動させてエアセル部等を膨らませます。



確認

送風チューブが折れ曲がらない位置にネオ専用ポンプがあることを確認します。


●ネオ専用ポンプの電源プラグを、家庭用コンセント(100V/50/60Hz)に差し込みます。電源プラグを差し込んだ時点で電源が入り電源ランプおよび初期設定(体重設定50kg、寝返角度20度、寝返時間0.5時間)の数値が点灯します。(※電源ランプが点灯していない場合は電源ボタンを押してください)

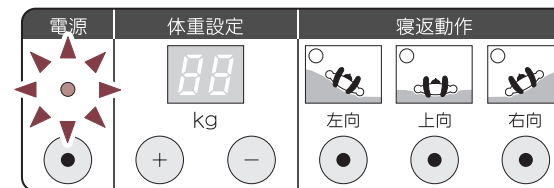

工夫

すぐにご使用になる場合には急速ポンプにてエアセルを膨らませてください。

急速ポンプ
(オプション)

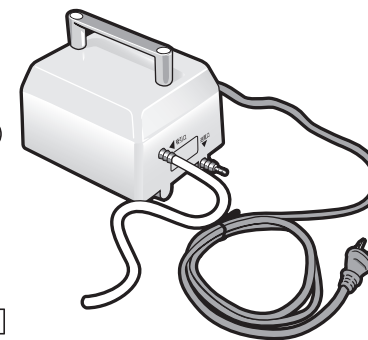

[使用手順]

1. 急速ポンプのチューブを本体の送風口に接続します。
2. 急速ポンプのチューブとネオ専用マットの送風チューブカプラ部を接続します。
3. 急速ポンプの電源プラグをコンセントに差し込みます。
4. 10分程度たったら電源を「切」にします。
(10分以上膨らまし続けると適正に膨らまない可能性があります)
5. ネオ専用マットの送風チューブを急速ポンプから外し、ネオ専用ポンプに接続します。
6. ネオ専用ポンプを作動させ、しばらくするとネオ専用マットの内圧が安定しご使用できます。



電源プラグは、必ず日本国内の家庭用コンセント(100V/50/60Hz)に確実に差し込んでお使いください！

これ以外の電圧で使用すると、火災事故や故障の原因となります。



説明

電源が入ると、約35分ほどで使用可能状態になります。



ホールドセル又はガードセル単体で35分以上送風が続いた場合、電源ランプが点滅します！



濡れた手でネオ専用ポンプの電源プラグを抜き差ししないでください！

感電事故や故障の原因となります。




急速ポンプで空気を送り込む際には必ず立ち会いながら送風し10分を限度としてください！


それ以上の時間、空気を入れ続けると、エアセルが破損する危険があります。

P.14 実際に使用しましょう（通常時）


P.13の設置準備で、急速ポンプを使用した場合と、急速ポンプを使用せず通常の設置準備をした場合では、作業時間に違いがあります。
以下のご説明をご覧ください。ご理解いただけますようお願いいたします。

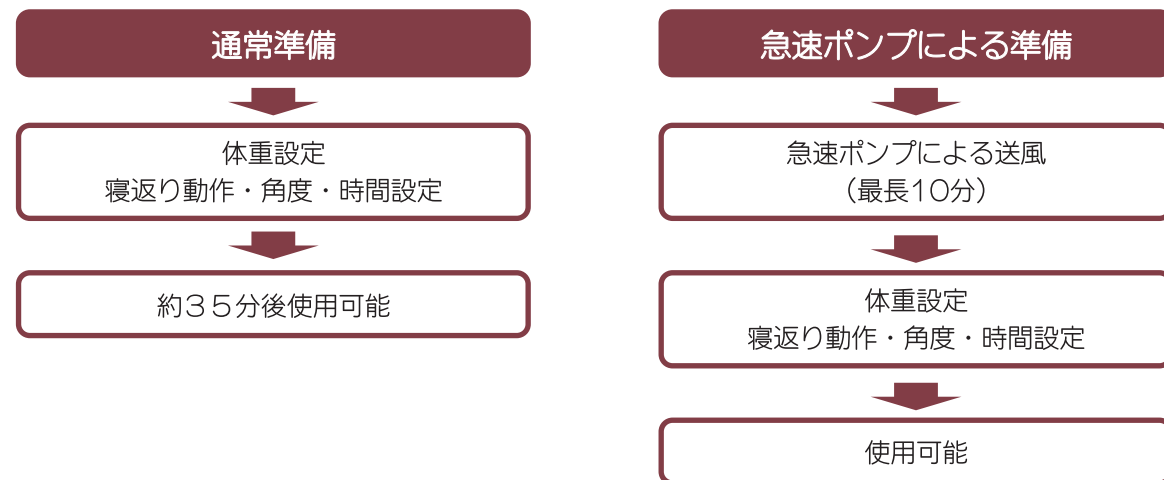

1 使用される方の体重に合わせて体重設定ボタンを押します。

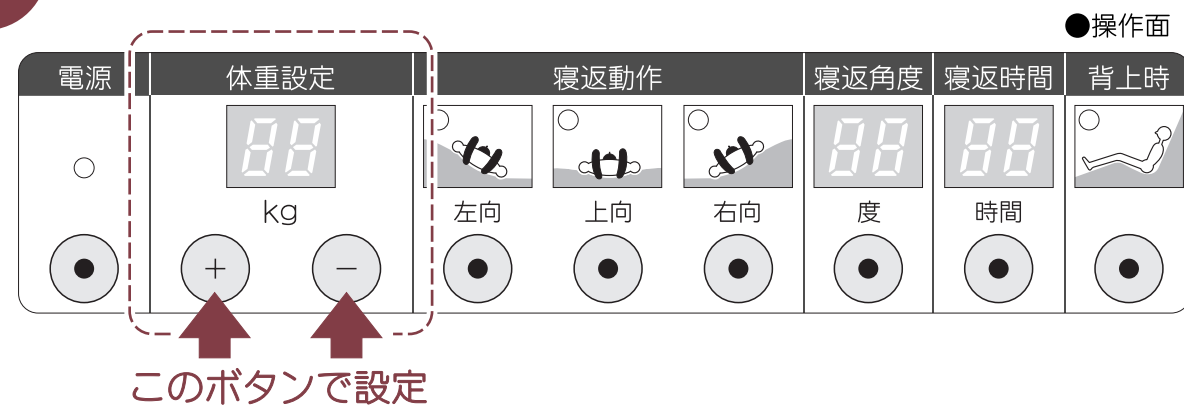

●P.9～13の準備を行い、ネオ専用マットのグラブセルとガードセルが完全に膨らんでいることを確認してください。

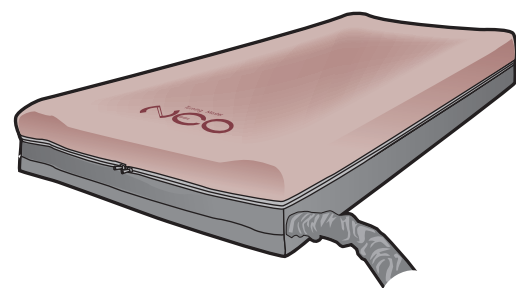

●体重設定表示を見ながら体重設定ボタンで体重を合わせてください。
(最初は50kgに設定されています)

設定後約35分そのまま

説明


ネオ専用マットが膨らみ使用できる状態になるまでに約35分かかります。

説明 便利な機能

一度設定した体重の値は記憶されます。
電源を切っても再度電源を入れた際には前に設定した値が表示されます。
尚、コンセントを抜いた際には再度の設定が必要になります。

P.15 実際に使用しましょう（通常時）

2 マットが膨らんだら、使用者に寝てもらいます。

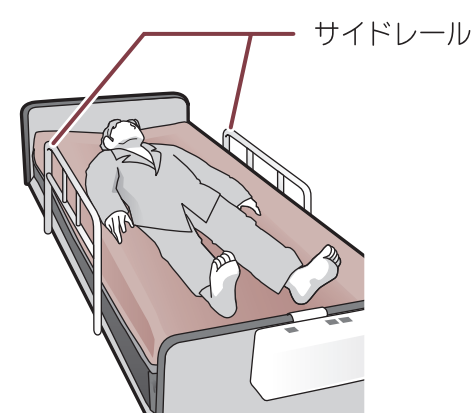


ご使用の際は、必ずサイドレールを取り付けて下さい



確認

送風チューブが出ている方が足側になっていることを確認してください。


3 使用される方の状態に合わせて、寝返りの向きを設定します。

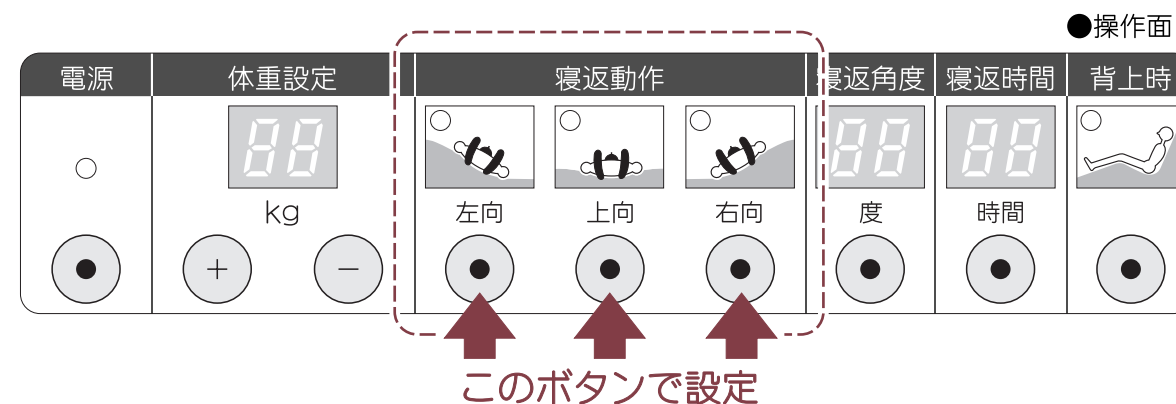

●「左向」「上向」「右向」それぞれのボタンを押して寝返りの向きを設定してください。


説明

寝返り動作設定ボタンを押して、ターニングセルが指定の角度まで膨らむのに、6分～10分程度かかります。
※マットが上向きになっていない場合に寝返り動作設定をすると数分～30分で上向きに戻り、それから寝返り動作が始まります。

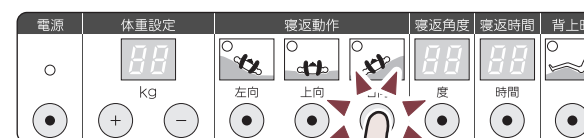


P.16 実際に使用しましょう（通常時）

4 寝返りの角度を設定します。

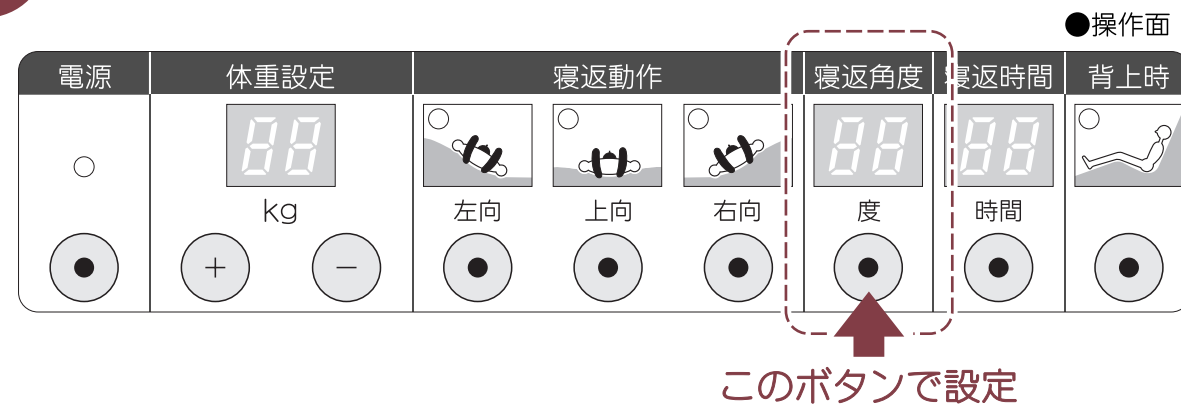

●寝返角度設定ボタンを押して、角度を設定してください。1回押すごとに5°ずつ設定が変わります。
(10°, 15°, 20°)

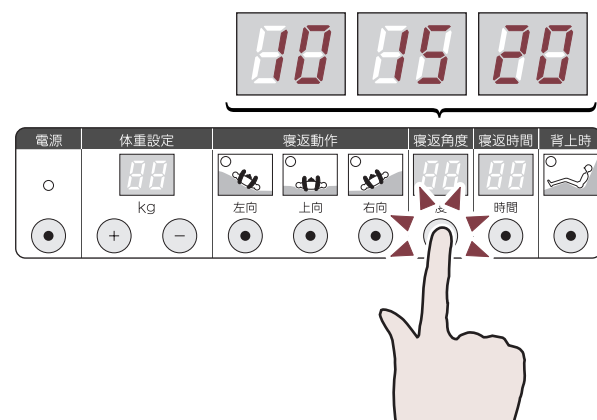


確認


左向き、あるいは右向きの設定をしていないと、角度は設定できません。
赤ランプが点滅します。

P.17 実際に使用しましょう（通常時）

5 寝返り時間を設定します。

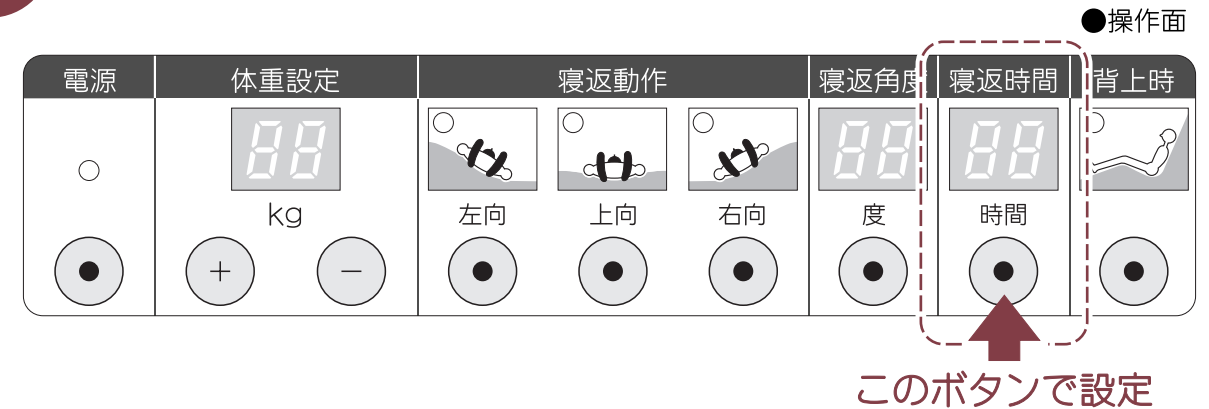

●寝返時間設定ボタンを押して、時間を設定します。1回押すごとに30分ずつ設定が変わります。
(0.5時間、1時間、1.5時間、2時間)

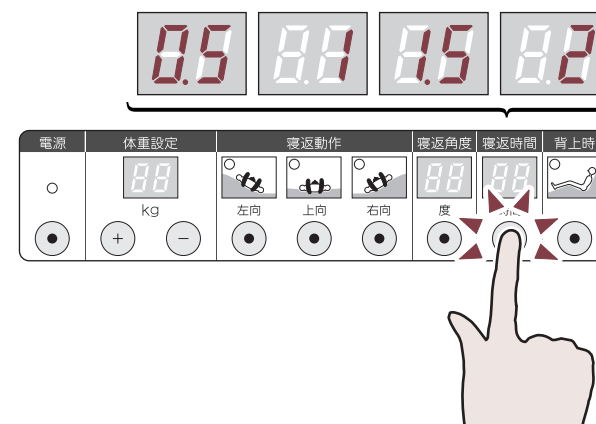


確認

左向き、あるいは右向きの設定をしていないと、角度は設定できません。
赤ランプが点滅します。

P.18 実際に使用しましょう（背上げ時）


エアマスターネオ専用マットは、背上げ時にも床ずれを効果的に予防できる「背上げ対応機能」が採用されています。以下に背上げ時の使用手順をご説明します。

1 操作面の「背上げ時」ボタンを押してください。

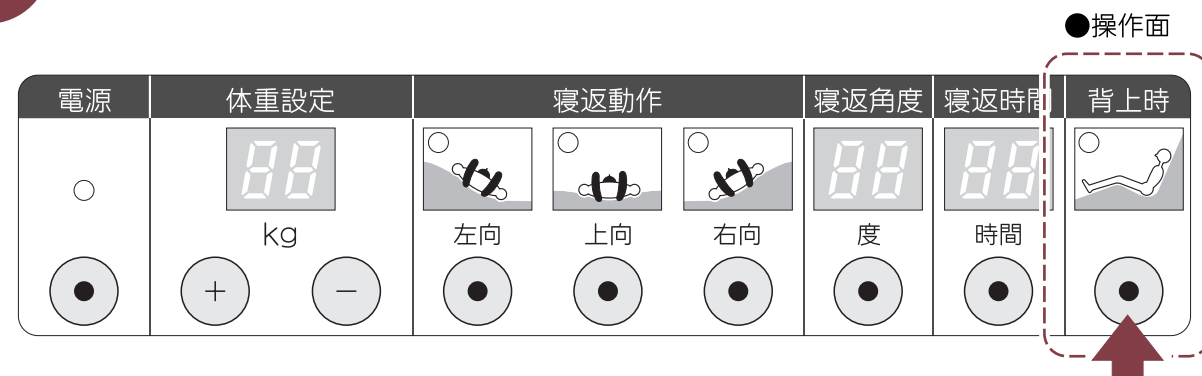

このボタンで設定

●寝返動作設定表示が「上向」になっていることを確認して下さい。

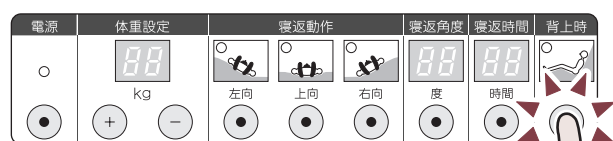

説明

背上げボタンを押すと、ポンプから送られる空気圧が上がり、背上げ時に最適な空気圧に調整します。それによって腎部の「底着き」を防止します。



マットが上向きになっているのを確認してください！

ターニングセルが膨らんだまま「背上げ」を行うと事故につながり、たいへん危険です。

説明

専用マットが上向きであれば、30分待つことなく背上げを実施して構いません。
●30分は、マット内圧の調節が終わる時間ではなく、マットが上向きになるまでの最長時間です。

説明

専用ポンプから送られる空気圧が変化し安定するまで、背上げボタンを入れてから約30分かかります。



- 上記の操作を行いマットの内圧が安定したのを確認します。（約30分後）
- 使用される方が寝た状態で、ベッドを背上げ状態にします。

P.19 実際に使用しましょう（背上げ時）

2 背上げボタンを押して、30分以上たってからベッドの背上げを実行してください。

●背上げの角度は、70度を限度としてください。



工夫

ネオをより効果的に使用するために身体にやさしい背上げ機能のベッドを選びましょう。背上げ時に腰と膝がゆるやかに曲がるものが良いでしょう。身体のずれと圧迫を軽減します。

お願い


「背上げ対応機能」は背上げ時に腎部の「底着き」を防ぐために空気圧を調整する仕組みになっています。したがって一回の背上げの時間は2時間以内を限度としてください。この時間を超えて背上げの必要がある際は「背上げ対応機能」を用いず、背上げの角度を30度以内にする 것을お勧めします。




禁止（注意）事項

ネオをご使用中、もしくは寝返り動作時にベッド付属のオーバーテーブルを使用した場合、マットの膨らみ、ターニングセルの膨らみによっては身体が挟み込まれる危険性が発生します。ご利用時は、オーバーテーブルを外して使用するか、オーバーテーブルと身体が接触しないことを確認してご使用ください。

〈通常時〉

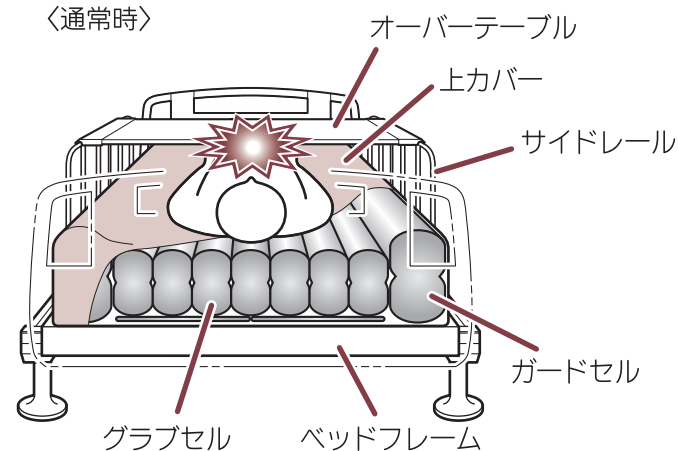

〈寝返動作時〉

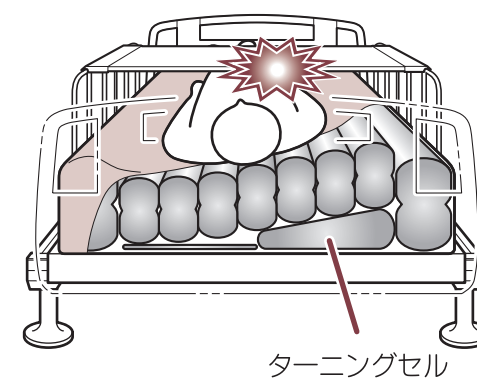

P.20 お手入れの仕方と保管・廃棄方法

ターニングマスターネオ専用マットの空気圧点検

- ネオ専用マットをご使用中は、必ず1日に数回の間隔でエアセルの空気圧点検を行ってください。
- 体重設定表示の設定（P.14）を確認し、設定した数値が表示されていることを確認してください。設定値が違っている時、電源プラグをコンセントから外した場合は必ず、直ちにP.14の手順に従って設定しなおしてください。
- 異常や変化が感じられる時、また困ったこと、わからないこと、不安なこと等が生じた場合にはP.22～23の「故障かな？と思ったら…」をご覧ください。送風チューブの接続不良や、エアセルの損傷による空気漏れなども考えられます。

各部の掃除

ネオ専用マットのお手入れ

- ◎（専用カバーに覆われていますので、頻繁な掃除の必要はありません）
- ネオ専用ポンプの電源ボタンを「OFF」（電源ランプが消えた状態）にして、ネオ専用ポンプから送風チューブを外します。
- エアセル部の空気を抜いてください。（オプションの急速ポンプを使うと便利です。）
- ネオ専用カバーを取り外します。
- エアセル部を掃除します。布に薄めた中性洗剤かぬるま湯を含ませ、固く絞ります。上記の布でネオ専用マット内のエアセル部の表面の汚れをふきとります。陰干しして自然乾燥させます。
- 完全に乾いてからネオ専用カバーを取り付けます。

ネオのエアセルは素材（ウレタンフィルム）の特性上、長期間使用すると黄変することがありますが、機能的には問題ありませんので続けてご使用ください。

ベンジン、シンナー、クレゾールなどは、材質を傷めますので使用しないでください。

ネオ専用カバーのお手入れ


- ネオ専用カバーをマットから取り外します。
- 手で押し洗いをします。
- 陰干しして自然乾燥させます。

ドライクリーニング、乾燥機、オートクレープは、裏面のポリウレタンフィルムを傷めますので使用しないでください。タンブラーでの乾燥はフィルムが剥がれたり、破れたりする恐れがありますので避けてください。スチームアイロン、スチームプレスは絶対に避けてください。アイロン仕上げをする時は100℃までの低い温度で、フィルムのない面に当て布をおいて掛けてください。

P.21 お手入れの仕方と保管・廃棄方法

ネオ専用ポンプのお手入れ

- ネオ専用ポンプの電源ボタンを「OFF」（電源ランプが消えた状態）にして、コンセントから電源プラグを抜きます。
- 布に薄めた中性洗剤かぬるま湯を含ませ、固く絞ります。上記の布でネオ専用ポンプの表面の汚れをふきとります。
- 底面にあるエアフィルターが汚れている場合は交換してください。エアフィルターは、使用場所の環境にもよりますが、連続使用の場合には1年に1回の交換をお勧めします。

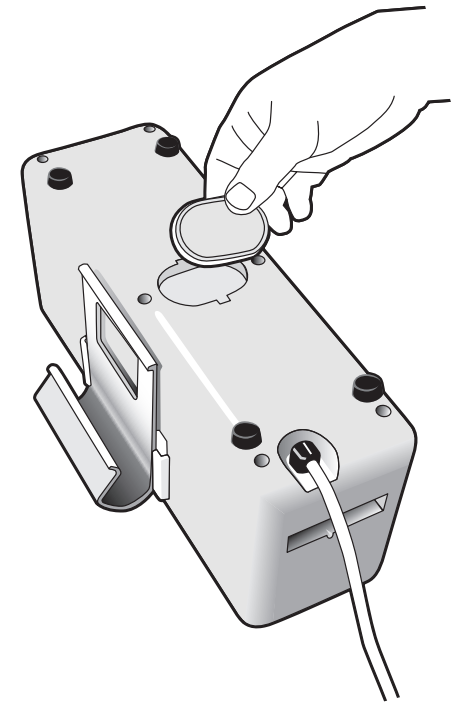

ターニングマスターネオを保管する場合

- ◎ネオのご使用を止め、保管なさる場合は以下の手順で保管してください。
- ネオ専用ポンプの電源ボタンを「OFF」（電源ランプが消えた状態）にして、コンセントから電源プラグを抜きます。
- ネオ専用ポンプから送風チューブを外し、エアセル部の空気を抜いてください。（オプションの急速ポンプを使うと便利です。）
- ネオ専用カバーを取り外します。
- 前述の「各部の掃除」と同様に、汚れを落とします。

- ネオ専用マット、ネオ専用カバーは折り畳み、お届け時に入っていたビニール袋に入れます。
- ネオ専用ポンプは電源コードを束ねて、お届け時に入っていたビニール袋に入れます。
- それぞれをお届け時に入っていた箱に納めて、保証書（本取扱説明書）と共に保管します。

ターニングマスターネオを廃棄する場合

廃棄する場合は「プラスチック製品」としてお取り扱いください。但し、専用カバーは「布製品」として廃棄してください。

P.22 故障かな？と思ったら…

P.23 故障かな？と思ったら…

症 状	考えられる原因	対処方法	本書の参照ページ
● ポンプが作動しない （電源ランプが点灯していない）	電源プラグがコンセントに入っていない 電 源 が 入 っ て い な い	電源プラグをコンセントに入れてください 電源ボタンを「ON」にしてください	P.13 P.13
● マットが膨らまない／柔らかすぎる。	ポンプが作動していない 送風チューブが外れている 送風チューブが折れ曲がっている エアフィルターが詰まっている 体重設定ボタンの調整が誤っている	電源ボタンを「ON」にしてください 送風チューブを接続し直してください 送風チューブを伸ばしてください エアフィルターを交換してください 体重設定ボタンを適正に調節してください	P.13 P.9 P.9 P.21 P.14
● エアセル部が部分的にしか膨らまない	エアセルどうしをつなぐ送風チューブが外れている	専用カバーを開き、抜けている箇所の送風チューブを接続し直してください	お 問 い 合 わ せ く だ さ い 。
● マットが硬すぎる	体重設定ボタンの調整が誤っている	体重設定ボタンを適正に調節してください	P.14
● ポンプの動作が一時的に停止する	故 障 で は あ り ま せ ん	そのままでご使用ください	
● ポンプの音が異常に大きい	ポンプの上に物がのっている ポンプが他の物に触れている ポンプを振動しやすい物の上に置いている	物を取り除いてください 物を取り除いてください ポンプを安定した水平な場所に設置してください	P.12 P.12 P.12
● 停電が発生した		停電回復後、再度、電源ボタンを押し直し、 体重、寝返動作、寝返角度、寝返時間の 設定を行ってください	

仕様一覧

	ターニングマスターネオ専用ポンプ	ターニングマスターネオ専用マット	ターニングマスターネオ専用カバー	さらっとシーツ
注 文 No	CR-381	CR-382	CH-382	CK-361
寸 法	幅34×高15.5×奥行11cm	幅84×長さ191×厚み20cm （オーバーレイ時厚み17cm）	※専用カバーは専用マットに取り付けてあります。	幅87×長さ191×厚み20cm
重 量	2.5kg（ポンプフック含む）	7kg（ウレタンフォーム1.2kg）		0.45Kg
材 質 等	ケース：ABS樹脂（抗菌機能付） ACコード長：4m AC100V 8W 50／60Hz	ベースシート：ナイロンオックス 滑り止め加工布（抗菌、防臭加工） エアセル：ウレタンフィルム 表面シボ加工 底部：厚み3cmウレタンフォーム	表地：ポリエステル（抗菌、 防臭加工） 裏地：ラミ加工ウレタンフィルム （防水加工）	ポリエステル100％ （抗菌、防臭加工）

ターニングマスターネオをお使いになっいて、または点検の際に何らかの異常や変化、疑問を感じられたときは、上記のことを確認し、それぞれについての説明が記載されている参照ページをご覧ください。それでも原因が不明なときは、故障や部品破損の可能性あります。ご使用を止め、裏面の保証書をご覧ください、ご購入先、もしくは株式会社ケーブまでお問い合わせください。